

Nebulizador de Malla Vibradora


NE-U22

MICRO A-I-R™



- Funcionamiento potente y silencioso
- Pequeño y compacto para uso en cualquier lugar
- Dos mascarillas incluidas

Tecnología de Malla Vibradora

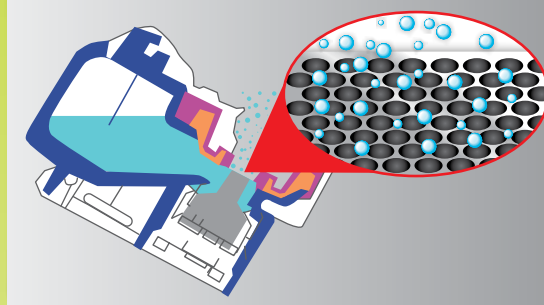

El nebulizador hace vibrar una pequeña placa-malla y bombea un vapor de gotas muy finas de medicamento a través de diminutos orificios en la malla.

- Bajo consumo eléctrico
- Nebulizador muy pequeño, silencioso y portátil



Este compacto nebulizador produce el tamaño ideal de partículas para un tratamiento eficaz. Con un peso de tan solo 97 gramos, el nebulizador NE-U22 no solo es compacto y fácil de transportar, pero también brinda un funcionamiento prácticamente silencioso.



Tamaño ideal de partículas para un tratamiento eficaz: Con $5\mu\text{m}$ MMAD*, el NE-U22 produce el tamaño ideal de partículas para un tratamiento eficaz, tratando las áreas adecuadas.



Tiempos cortos de administración del medicamento: Gracias a la excepcional Tecnología de Malla Vibradora de Omron, este nebulizador cuenta con un eficaz y corto tiempo de administración del medicamento (0.25ml/minuto), a la vez que reduce el desperdicio de medicación.



Menos peso para un transporte más fácil: Con un peso de tan solo 97 gramos**, el nebulizador NE-U22 es compacto y fácil de transportar.



Silencioso: El NE-U22 brinda un funcionamiento prácticamente silencioso.



Garantía de 3 años*:** Garantía limitada de tres años que le da tranquilidad.



Úselo en cualquier lugar: Ya que el ángulo del NE-U22 es ajustable, los pacientes tienen la libertad de sentarse o acostarse a cualquier ángulo.



* Mass Median Aerodynamic Diameter
** No incluye las pilas y accesorios.
*** Excluye la tapa de la malla y los accesorios.


OMRON
Valora su salud

Nebulizador de Malla Vibradora



ESPECIFICACIONES:

- Modelo NE-U22
- Consumo eléctrico 1.5 W
- Velocidad de nebulización 0.25 ml/min. mínimo
- Tamaño de las partículas *MMAD aproximadamente 5µm
- Capacidad de medicamento 7 ml máximo
- Temperatura/Humedad de funcionamiento +10 °C a +40 °C/30% a 85% HR
- Temperatura/Humedad/
Presión de aire de almacenamiento -20 °C a +60 °C/10% a 95% HR /
700 hPa a 1060 hPa
- Frecuencia de vibración 180 kHz
- Dimensiones 38 mm x 51 mm x 104 mm
- Peso 97 gramos
- Pilas 2 pilas alcalinas "AA" o pilas
recargables NiMH (no incluidas)
- Contenido Unidad principal, depósito para el medicamento, bolsa de almacenamiento,
cubierta de la unidad principal, boquilla, tapa de la malla, adaptador para
mascarilla y boquilla, manual de instrucciones, mascarilla para niños,
mascarilla para adultos
- Nivel de protección contra el ingreso dañino de agua: equipo común (equipo cerrado sin protección contra el ingreso de agua)
 - Nivel de seguridad al utilizarse en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nítrico: Equipo no adecuado para ser utilizado en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nítrico
 - Modo de operación: Continua.
- Este producto cumple con los requisitos del ISO 10993-1
- Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

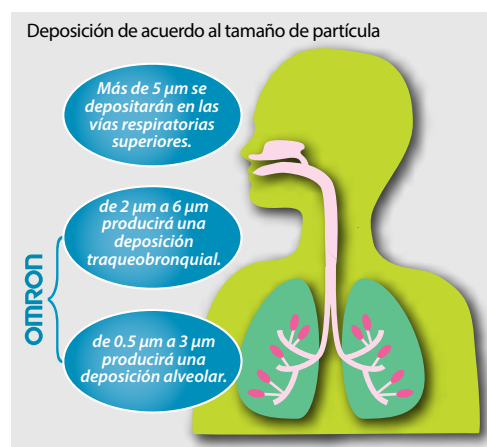

*Basado en EN13544-1:2007



Pieza aplicada tipo B



Lea el manual de instrucciones detenidamente

	Pulmicort®	Intal®	Salbutamol®
MMAD (micrón)	6.76µ	6.43µ	5.79µ
Desviación Estándar Geométrica (GSD, por sus siglas en inglés)	2.08	2.56	2.75
Fracción respirable (% de masa 0.52 a 6 µ)	65.0%	66.0%	73.4%

Impactador de cascada probado a 13 lpm (pulgadas por minutos):

Tiempo que dura el tratamiento: 5 minutos para 2 ml.

- Tenga en cuenta que las especificaciones pueden variar según el tipo de medicamento utilizado.

Distribuido por:

* MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter

Omron Healthcare, Inc.

Illinois, USA

www.omronhealthcare.com

OMRON

© 4/2011 Omron Healthcare, Inc.