

MASAJEADOR DE ELECTROTERAPIA PORTÁTIL HV-F013

CONTROL

SOLUCIÓN PARA EL DOLOR SIMPLE

Los controles facilitan la operación y ofrecen una terapia para el dolor personalizada con 10 niveles de intensidad, 3 modos de tratamiento (brazo/hombro, zona lumbar, pie/pierna) y 2 modos de masaje (frotamientos, movimiento constante).

TRATAMIENTO PARA EL DOLOR EN EL HOGAR

A través de una estimulación nerviosa suave, ayuda a aliviar el dolor en músculos y articulaciones. Ideal para aliviar la fatiga muscular gracias a que mejora la circulación sanguínea en las áreas tratadas.



5 Programas de tratamiento	10 Niveles de intensidad
---	---------------------------------------

↘ HV-F013

El HV-F013 es útil para aliviar el dolor en la zona lumbar o dolor recurrente en la rodilla o el hombro. Úselo en casa o llévelo al trabajo o de viaje. El masajeador es portátil, cabe perfectamente en la palma de la mano o dentro del bolsillo para un uso discreto. El HV-F013 cuenta con 10 niveles distintos de intensidad y 5 programas, incluyendo 3 modos de tratamiento y 2 modos de masaje que pueden ser configurados con facilidad para obtener el tratamiento deseado.



3 modos de tratamiento

Modo de tratamiento preconfigurado para la región de los brazos/hombros, zona lumbar, pie/pierna



2 modos de masaje

Programa de tratamiento de masajes preconfigurado (frotamientos, movimiento constante)



10 niveles de intensidad

Ajuste de la intensidad para un tratamiento más cómodo



LONG LIFE PADS

(Electródos de larga duración)
Cómodos y reutilizables - 150 usos

Nota: Los electrodos son para uso exclusivo de un solo paciente.



OMRON®

MASAJEADOR DE ELECTROTERAPIA PORTÁTIL

HV-F013




ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Caja	Cantidad	Peso
Unidad:	1 unidad	230 g
Máster:	12 unidades	3.3 kg
Código UPC	073796826130	

Dimensiones aprox. (ancho x alto x profundidad)
 90 mm x 63 mm x 181 mm
 293 mm x 224 mm x 277 mm

ESPECIFICACIONES:

Modelo:	HV-F013
Características eléctricas:	3 V = (con dos pilas "AAA" alcalinas [LR03] o de magnesio [R03])
Consumo de energía:	Aprox. 40 mA
Vida útil de las pilas:	Las pilas nuevas (dos pilas alcalinas AAA) durarán aprox. 3 meses (con un uso de 15 minutos al día, Modo Zona lumbar, máx. intensidad).
Frecuencia del impulso:	Aprox. 1 a 108Hz
Salida máxima de voltaje:	32 V (durante una carga de 500Ω)
Control de potencia:	10 niveles de intensidad
Temperatura de funcionamiento, humedad (al usar el producto):	10 a 40 °C, 30 a 80% RH
Almacenamiento y temperatura del transporte, humedad/presión del aire:	-20 a 60°C, 10 a 95% RH, 700 a 1060 hPa
Peso:	Aprox. 75 g (pilas incluidas)
Dimensiones de la unidad principal (Ancho x Alto x Profundidad):	75 mm x 70 mm x 22 mm
Contenido del paquete:	Masajeador de Electroterapia Portátil, 2 pilas AAA (LR03), 2 electrodos (Long Life Pads), portaelectrodos, cable para electrodos, manual de instrucciones, guía de inicio rápido/guía para la colocación de los electrodos

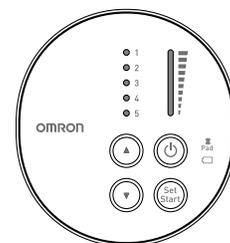

Precauciones: No utilice este dispositivo si tiene un marcapasos, desfibrilador u otro dispositivo metálico o electrónico implantado, no utilizar en mujeres embarazadas y niños. Consulte a su médico antes de comenzar a utilizar este producto. Lea el manual de instrucciones.



Nota: Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio. La eliminación de este producto y de las pilas usadas deben realizarse de acuerdo con las normas nacionales para la eliminación de productos electrónicos.